

더마아키텍트 FAQ 가이드

Q. 스킨 피트니스 모드 사용 시, 6초 간격으로 떼었다가 붙였다를 반복하는 이유가 무엇인가요?

얼굴에서 디바이스를 떼었다가 다시 접촉하는 과정은 사용 편의가 아닌 안전을 위한 부분입니다. 동일 부위에 연속 동작을 방지하고, 열로 인한 피부 손상을 예방하기 위해서는 인터벌 시간이 필요합니다. 따라서 **6초가 지난 후 디바이스를 피부로부터 완전히 떼뒤, 다음 부위로 이동하여 접촉해 주셔야 합니다.**



Q. 스킨 피트니스 50샷을 했는데, 다 케어 하지 못할 경우 어떻게 하나요?

충분히 케어를 진행했을 경우, 50샷으로 목을 포함한 얼굴 전체 케어를 마치지 못하셨을 수 있습니다. 더마아키텍트는 무제한 샷 제품이므로 남은 부위에 대해 다시 시작 버튼을 눌러 케어를 이어 진행하시면 됩니다. 다만, 같은 부위에 중복 케어는 권장하지 않습니다.

Q. 스킨 피트니스만 단독 사용해도 되나요?

탄력 효과를 위해 단독 사용이 가능하지만, 건강한 탄력의 완성 및 유지를 위해서는 스킨 뉴트리션 모드와 함께 사용해주는 것을 권장드립니다.



Q. 더마아키텍트 부스팅 젤은 반드시 사용해야 하나요?

스킨 피트니스 케어 시, 부스팅 젤은 필수입니다. 부스팅 젤은 피부에 에너지를 전달하는데 도움을 줄 뿐 아니라, 과도한 열로부터 피부를 보호하는 보호층 역할을 하여 피부 자극이나 불편함을 줄여줍니다. 열감이 과도하게 느껴지는 부분에는 젤을 더 도톰하게 도포해주시면 도움이 됩니다.

*더마아키텍트 부스팅 젤은 별도 구매가 가능할 예정입니다.



Q. 더마아키텍트 부스팅 젤은 어느 정도 사용해야 하나요?

1회 사용 시, 얼굴 전체와 목까지 케어할 수 있도록 500원 동전 크기 정도의 양을 사용하는 것을 권장드립니다. 필요 시 부위별로 소량씩 추가 도포해도 좋습니다. 젤이 너무 적으면 피부와 디바이스 사이 전도율이 낮아질 수 있으므로, 충분한 양을 사용해 주세요.

더마아키텍트 FAQ 가이드

Q. 스킨 피트니스 케어 후, 스킨 뉴트리션 케어를 진행할 경우 젤을 제거해야 하나요?

스킨 피트니스 케어 후에는 반드시 부스팅 젤을 제거해 주셔야 이후 진행되는 스킨 뉴트리션 케어 시, **스킨케어의 유효성분이 피부 속 깊이 효과적으로 흡수될 수 있습니다.**

젤을 제거할 때에는 스킨 피트니스 케어 시 피부에 전달된 열 에너지가 빠르게 식지 않도록 미온수로 간단히 세안을 해 주시거나, 토너를 듬뿍 적신 화장솜으로 부드럽게 닦아주시면 됩니다.



Q. 부스팅 젤을 씻지 않고 닦아낸 후, 바로 다음 단계 스킨케어를 해도 피부 트러블이 발생하지 않나요?

트러블 발생 유무는 사용자의 피부 상태에 따라 다를 수 있습니다. **더마아키텍트 부스팅 젤은 리브온 타입으로 간주되는 스킨케어제품의 한 종류이며, 고수분이 함유되어 가볍게 흡수되는 특징을 갖고 있습니다.** 따라서 흡수시킨 후 다음단계 스킨케어를 하셔도 좋지만 그 다음단계의 스킨케어 흡수를 위해 간단히 화장솜으로 제거 후 또는 미온수로 가볍게 물 세안을 해주시는 것을 권장드립니다.

Q. 더마아키텍트 스킨 피트니스 케어 후, 얼굴에 발생한 열감을 빠르게 식히는 것이 좋나요?

스킨 피트니스 모드 사용 후 얼굴에 느껴지는 열감은 에너지가 피부 속에 전달되어 작용하고 있는 자연스러운 반응입니다. 이 열에너지는 피부 깊숙이 전달되어 탄력 개선 효과를 유도하는 중요한 역할을 합니다. 따라서, **스킨 피트니스 케어 직후 차가운 물로 세안하거나 얼음찜질처럼 급격하게 피부 온도를 낮추는 행위는 권장되지 않습니다.**

Q. 더마아키텍트의 스킨 피트니스 모드의 경우, 카트리지를 변경해야 하나요?

더마아키텍트의 스킨 피트니스 모드는 카트리지 교체 없이 무제한 샷으로 사용이 가능합니다.


더마아키텍트는 2개의 고주파와 1개의 초음파를 복합적으로 활용하는 기술 구조로 사용 횟수에 따른 카트리지 소모가 발생하는 방식의 제품이 아닙니다.

따라서 카트리지 교체 없이 무제한 반복 사용이 가능하다는 점이 큰 장점이며, 경제성까지 갖추어 부담 없이 꾸준한 홈 케어가 가능합니다.



더마아키텍트 FAQ 가이드

Q. 더마아키텍트 스킨 피트니스의 초음파와 집속초음파의 차이에 대해 알려주세요.

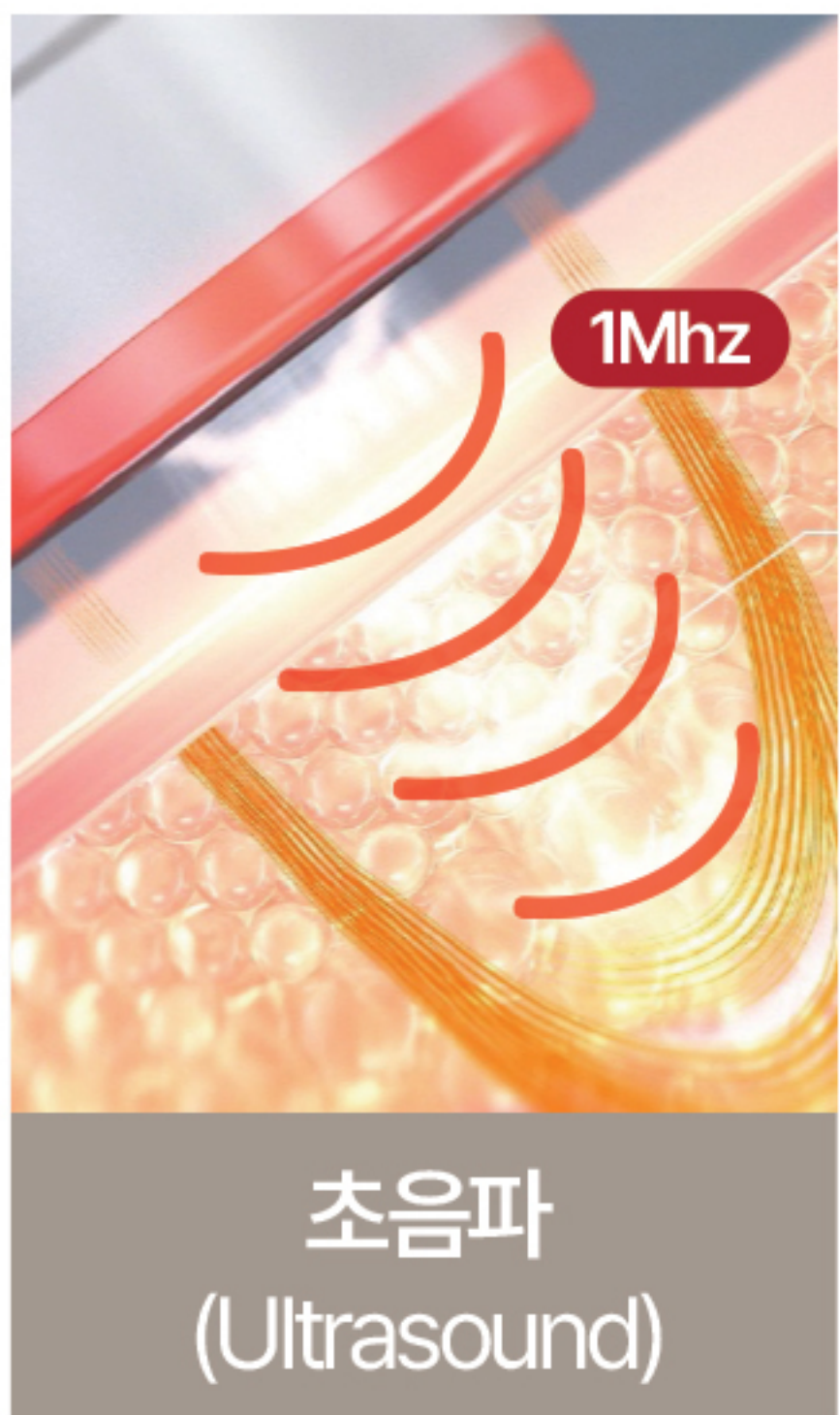

더마아키텍트 스킨 피트니스에 적용된 초음파는 강력한 미세 진동 에너지를 통해 피부 깊숙이 자극을 전달하고, 콜라겐 합성에 도움을 줍니다. 반면, 집속 초음파(HIFU)는 고강도 에너지를 피부의 특정 지점에 집중 조사해 열응고점을 생성하고, 이를 통해 늘어진 조직을 수축시키는 방식입니다. 집속 초음파 방식은 대부분 카트리지 내부에 소모성 용매를 사용하기 때문에 일정 횟수 사용 후 카트리지를 교체해야 하는 번거로움과 유지비용이 수반됩니다.

더마아키텍트는 이러한 카트리지 교체 없이 무제한 사용 가능하며 일상적으로도 안전하게 탄력 케어가 가능한 홈 뷰티 디바이스입니다.

Q. 스킨 피트니스 모드 사용 시, 따가움과 열감이 느껴집니다.

스킨 피트니스 케어 시, 열감이 느껴지는 것은 자연스러운 현상이나 견디지 못할 열감과 따가움이 발생할 경우, 기기 표면이 얼굴에 잘 밀착되어 있는지 확인해주세요. 틈이 있거나, 한 쪽으로 기울어 밀착되지 않으면 열 에너지가 좁은 부위에 집중 전달되어 불편감이나 자극을 유발할 수 있습니다.

Q. 스킨 피트니스와 스킨 뉴트리션 케어 진행 시 피해야 하는 부위가 있을까요?

눈, 코, 인중, 입술, 갑상선 부위를 피하여 사용해주시고 눈 주변 부위의 경우 디바이스를 눈에서 1cm 떨어진 상태로 사용해주십시오.



Q. 스킨 뉴트리션 모드를 사용 시, 전기가 튀는 듯한 따끔거림이 느껴집니다.

불꽃이 튀는 듯한 자극이 느껴진다면, 즉시 사용을 중단하고 피부 상태를 확인해 주세요. 이는 피부가 건조하거나 스킨케어 제품(젤, 세럼 등)이 충분히 도포되지 않은 경우 발생할 수 있습니다. 피부를 충분히 보습한 후, 이전보다 더 낮은 강도에서 다시 사용해 보시기 바랍니다.



더마아키텍트 FAQ 가이드

Q. 더마아키텍트 스킨 피트니스/스킨 뉴트리션 모드 모두 높은 강도로 사용하는 것이 가장 효과가 좋나요?

반드시 높은 강도로 사용한다고 해서 효과가 더 좋은 것은 아닙니다.


더마아키텍트의 스킨 피트니스 및 스킨 뉴트리션 모드는 강도 설정에 관계없이 동일한 주파수(Hz)의 에너지를 전달하므로 타겟되는 깊이나 작용 원리는 변하지 않습니다. 강도별로 차이가 있는 것은 사용되는 에너지의 양입니다.

사람마다 피부층의 두께나 민감도, 컨디션이 다르기 때문에 각 사용자에게 필요한 에너지량도 다를 수 있습니다.

이에 따라 더마아키텍트는 총 5단계의 강도로 구성되어 있으며, 피부 상태에 맞춰 안전하고 효과적으로 케어할 수 있도록 설계되었습니다. 가장 중요한 것은 피부에 부담 없이 꾸준히 사용할 수 있는 적정 강도를 선택하는 것입니다.

여러 단계를 사용해보신 후, 본인에게 가장 편안하면서 효과적인 강도를 선택해 사용하시길 권장드립니다.

Q. 더마아키텍트에 적용된 고주파와 일반적인 저주파/중주파의 다른 점이 궁금해요.

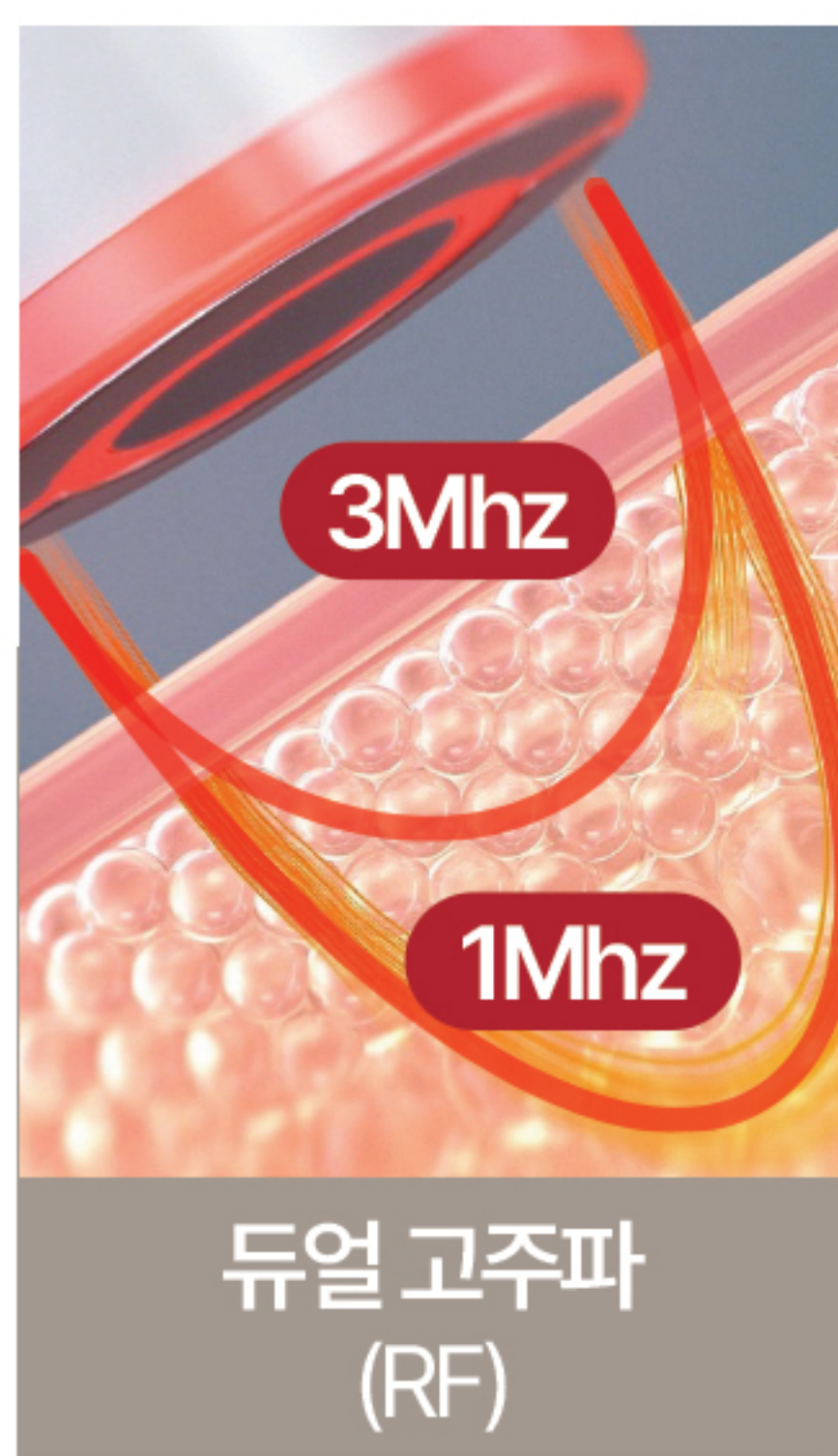

고주파/저주파/중주파를 나누는 기준은 진동수(Hz)입니다.

일반적으로 0~1000Hz :저주파 / 1Khz~100KHz : 중주파 / 100Khz~수 MHz : 고주파로 분류됩니다.

더마아키텍트는 고주파(RF)를 사용하며, 주파수는 1MHz와 3MHz의 교차출력 방식입니다.

(1Mhz = 1,000Khz = 1,000,000Hz)

일반적으로 고주파는 저주파(~1000Hz), 중주파(~100kHz)에 비해 진피층을 타겟하여 전기 에너지를 침투시켜 심부열을 발생시키며, 콜라겐 생성 도움 및 피부 탄력 케어에 효과적입니다. 저주파는 주로 근육 자극, 통증 완화에 사용되고, 고주파는 열 에너지 기반의 미용 목적에 사용됩니다.

Q. 더마아키텍트가 의료기기가 아닌 미용기기인 이유가 있나요?

의료기기의 경우, 제품 생산 및 판매를 하는데 있어서, 심사 후 자격을 받은자만 생산할 수 있으며 판매할 수 있습니다. 또한, 의료기기로 등록 시 의료기기 판매업자로 등록하지 않은 일반 ABO들은 해당 제품을 판매할 수 없기 때문에 더마아키텍트는 미용기기로 등록하였습니다.



Q. 민감성 피부와 여드름성 피부에도 사용이 가능한가요?

민감성 피부와 여드름성 피부에도 더마아키텍트 사용은 가능합니다. 다만, 민감성 피부나 여드름성 피부를 가진 분들은 일반적으로 피부가 예민하기 때문에 기기 사용에 주의해야 합니다. 구진이나 농포 등 염증성 여드름이 있는 부위에는 가급적 기기 사용을 피할 것을 권장하며, 가장 낮은 강도부터 천천히 강도를 높여 사용하는 것이 필요합니다.

제품 사용 도중, 자극이 심한 경우 사용을 중단 부탁드립니다.

더마아키텍트 FAQ 가이드

Q. 보톡스, 필러, 실리프팅을 받은 피부에도 사용이 가능한가요?

보톡스, 필러, 자가지방/실리프팅과 같이 어떤 성분을 넣어서 진행하는 시술은 디바이스가 전달하는 열에 의해 파괴되거나 변형이 일어날 수 있기 때문에, **최근 2개월 이내에 위 시술을 받으셨다면 사용을 피해주시길 바랍니다.**



Q. 이마부위가 유독 아픉니다.

이마의 피부층은 얼굴의 다른 부위에 비해 얇고, 근육 및 뼈와 가깝기 때문에 더 민감합니다. 또한 신경과 혈관이 밀집되어 있어 자극에 더 취약할 수 있습니다. **이마에서 자극이 느껴질 경우, 해당 부위에는 강도를 줄여 사용하시는 것을 권장드립니다.**

Q. 이시림, 치통이 발생하는데 괜찮은 걸까요?

자극을 최소화하도록 설계하였으나, 일부 신경이 많은 턱뼈, T라인 주변은 신경까지 전기자극이 들어가게 되어 이시림 치통 등이 발생할 수 있습니다. 따라서 뼈 부위가 아닌 피부에 밀착하여 케어하시는 것을 권장드립니다.

Q. 살균 모드는 몇 분동안 작동하나요?

살균 기능은 8분 정도 작동되며, 이 시간 동안 **99.9%의 대장균, 녹농균, 황색포도상구균, 박테리아 2종(세라티아 마르세센스 박테리아, 프로테우스 불가리스 박테리아)**이 제거됩니다. 매일 디바이스를 사용하신 후 마른 천이나 젖은 티슈로 한 번 세척하시고 UV 살균&충전 거치대에 넣어주시는 것을 권장드립니다.



Q. 다른 사람에게 케어를 진행해줄 때, 신체가 접촉해야 기기가 작동하나요?

네, 이는 전기적 특성 때문이며, 다른 사람에게 케어를 진행해 주실 경우 손잡기와 같은 신체 접촉을 하신 후 진행을 해 주셔야 합니다.

더마아키텍트 FAQ 가이드

Q. 완전 충전까지 걸리는 시간은 얼마인가요?

약 3시간입니다(4.75~5.25 / 100mA 기준).

고속 충전기로도 충전 가능하지만, 충전 속도는 일반 속도로 유지됩니다.



Q. UV 살균&충전 거치대는 충전선이 연결되었을 때에만 작동하나요?

UV 살균&충전 거치대는 충전선이 연결되어 있을 경우에만 살균과 충전 기능이 작동합니다.

더마아키텍트는 강력한 에너지를 피부에 전달하는 기기로서 배터리를 일상시에도 충전해두는 것을 권장 드립니다.

Q. 더마아키텍트는 아티스트리 어떤 제품과 함께 사용이 가능한가요?

스킨 피트니스 모드는 더마아키텍트 부스팅 젤과 함께 사용을 해주시면 피부에 열 에너지 전달이 더 잘 이뤄집니다. 또한 기기에 발생하는 열감으로부터 피부를 보호해줍니다.

스킨 뉴트리션 모드의 '비타민C모드'는 스킨 뉴트리션 비타민C+히알루론산 트리플 액션과 '스킨케어 모드'는 아티스트리 스킨케어 제품들과 함께 사용을 해주시면 됩니다.



Q. 새롭게 출시된 아티스트리 랩스 일루미네이팅 시스템과 병행 사용이 가능한가요?

랩스 일루미네이팅 시스템은 더마아키텍트의 스킨케어 모드와 병행하여 사용하실 수 있습니다.

다만, 해당 제품에는 다양한 미백 기능성 성분이 포함되어 있어, 개인에 따라 따끔거림이나 가려움 등의 자극감이 느껴질 수 있습니다. 따라서 처음 병행 사용 시에는 더마아키텍트를 낮은 강도로 시작하실 것을 권장드립니다.

또한, 자극이 느껴질 경우에는 즉시 사용을 중단해주시기 바랍니다.



Q. 아티스트리 제품 중 함께 사용이 불가한 제품은 무엇인가요?

아티스트리 시그니처 셀렉트 폴리싱 마스크/브라이트닝 마스크,
랩스 리텍스처라이징 필/디바이스, 인텐시브 스킨케어 14나이트 리셋 프로그램,
인텐시브 스킨케어 안티 링클 퍼밍 씨럼, 오가닉 에센셜 오일
(페퍼민트, 레몬, 라벤더, 프랑킨센스)와 같은 날 사용이 불가합니다.

